

Załącznik nr 3 dla sprzętu medycznego z serii:**CS 8100 / CS 8100 3D / CS 8100 3D ENDO/
CS 8100 SC / CS 8100 SC 3D / CS 8100 SC 3D ENDO
CS 8200 3D / CS 8200 SC 3D
(EVO)****Przygotowanie pomieszczenia do montażu.**

Szanowni Państwo,

Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Państwu w przygotowaniu się do instalacji aparatu CS 8100. W dalszej części niniejszego opracowania przekażemy informacje, które pozwolą na przemyślane zaplanowanie miejsca instalacji urządzenia oraz umożliwi waszemu elektrykowi sprawdzenie i przygotowanie instalacji zasilającej. Z naszego doświadczenia wynika, że staranne zaplanowanie lokalizacji aparatu i przygotowanie instalacji elektrycznej umożliwiają znaczne skrócenie czasu montażu, podniesienie estetyki wykonanych prac (np. ułożenie przewodów pod tynkiem) oraz uniknięcie wszelkiego rodzaju nieoczekiwanych sytuacji podczas instalacji urządzenia. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji.

Michał Białek tel. 509 203 175

Jerzy Mączka tel. 509 857 643

Iwo Rutański tel. 535 555 047

Mariusz Stefański tel. 695 903 420

Bartosz Słota tel. 607 224 465

Damian Oczkowski tel. 609 619 093


I. Wymiary i lokalizacja urządzenia

Podane na poniższym rysunku wymiary uwzględniają fizyczne gabaryty urządzenia. Przy wyborze lokalizacji urządzenia należy uwzględnić dodatkową przestrzeń komunikacyjną co najmniej 60cm po lewej lub prawej stronie urządzenia.

Pomieszczenie, w którym będzie zainstalowane urządzenie, musi odpowiadać polskim normom i przepisom dotyczącym pomieszczeń dla urządzeń radiologicznych.

W szczególności pomieszczenie musi mieć co najmniej 2,5m wysokości oraz 8m² powierzchni na pierwsze urządzenie rentgenowskie i 4m² na każde następne. W pomieszczeniu musi być sprawna instalacja wentylacyjna zapewniająca co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Należy zapewnić łączność wzrokową i słuchową pomiędzy operatorem a pacjentem podczas wykonywania ekspozycji. Obecnie najczęściej do tego celu wykorzystywane jest lustro lub kamera z monitorem. Dodatkowo w większości

województw w pomieszczeniu z RTG musi znaleźć się umywalka. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Państwa regionalną stacją Sanepid.

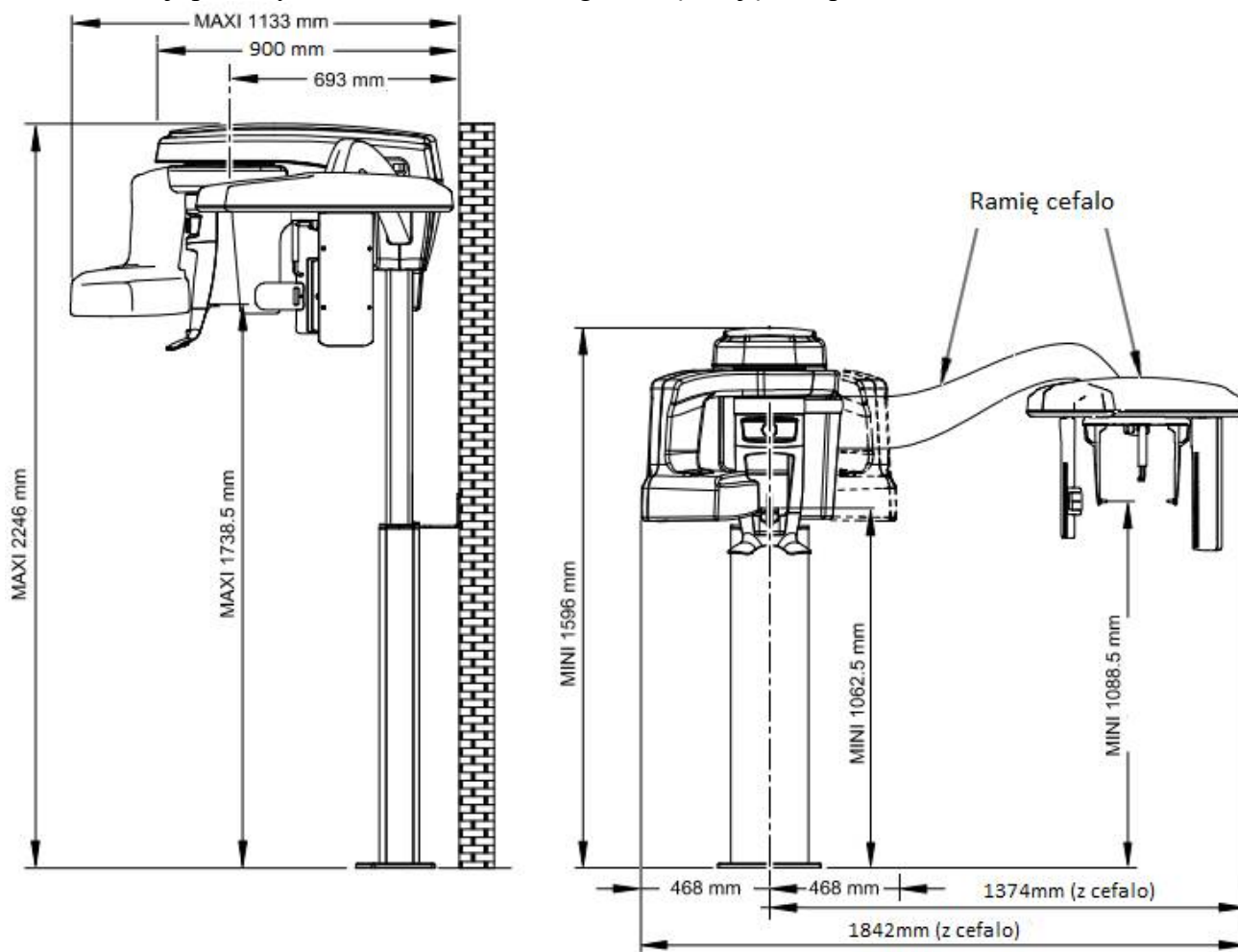


Rysunek 1 Wymiary urządzenia


Urządzenie montowane jest do ściany (dwa otwory na wysokości ok. 105cm) i do podłogi (dwie lub trzy śruby około 7-9 cm i jedna około 24 cm od ściany). Ściana, do której montowane jest urządzenie, musi być murowana lub z żelbetu (co najmniej cegła pełna 12cm). **Ściana, na której będzie montowany aparat, musi być bez żadnych wystających elementów typu cokoły, zabudowy, parapety itp.** Nie ma możliwości bezpośredniego montażu aparatu do ściany z płyty kartonowo-gipsowej – w takim przypadku konieczna jest dodatkowa konstrukcja wsporcza. **Jeśli w podłodze w miejscu instalacji znajdują się rury, ogrzewanie podłogowe lub przewody, konieczne jest zastosowanie dodatkowej płyty montażowej,** która umożliwia montaż aparatu bez konieczności wiercenia w podłodze. **Płyta montażowa jest dodatkowo płatna** i nie wchodzi w skład aparatu, dlatego prosimy o wcześniejsze poinformowanie o konieczności dostarczenia jej na montaż urządzenia.

Prosimy także, aby upewnić się, czy w planowanym miejscu montażu w ścianie nie znajdują się żadne przewody, rury lub inne elementy.


Należy zwrócić uwagę, że za kolumną urządzenia znajdują się ruchome części, które zmniejszają prześwit pomiędzy kolumną a ścianą, dlatego za urządzeniem nie mogą znajdować się żadne elementy odstające od ściany jak np. skrzynki przyłączeniowe.

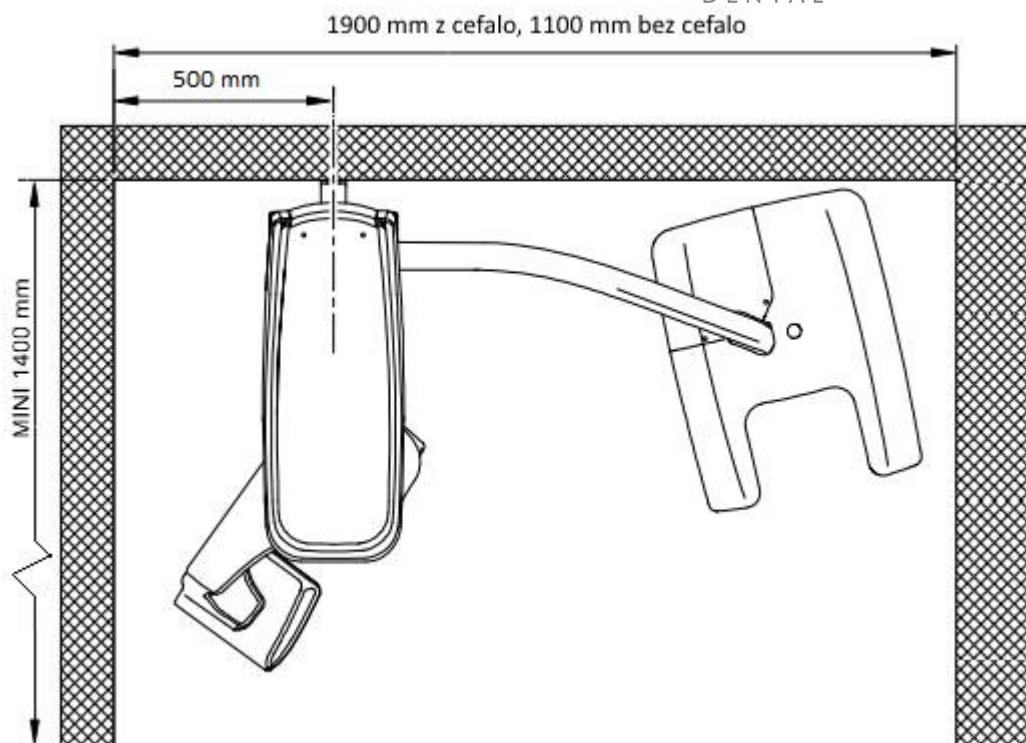

Rysunek 2 Widok z góry – zalecane minimalne wymiary pomieszczenia i odległości instalacji

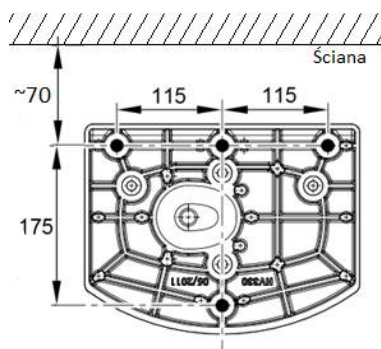


Rysunek 3 Widok stopy montażowej – rozmieszczenie przewodów w podłodze

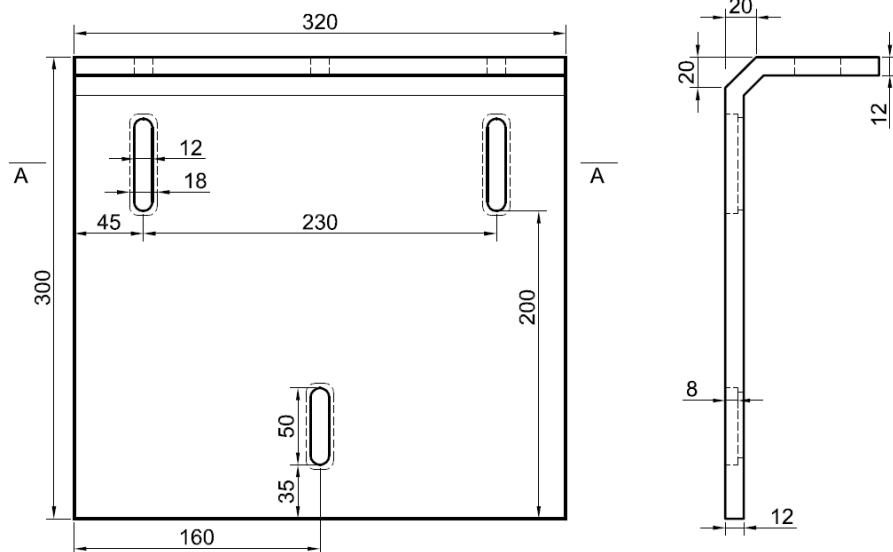

Rysunek 4 Przykładowa płyta montażowa przykręcana do ściany

II. Instalacja elektryczna

Okablowanie dla urządzenia CS8100 powinno zostać wykonane zgodnie z załączonym schematem. Urządzenie powinno pracować na wydzielonym obwodzie elektrycznym pod rygorem utraty gwarancji.

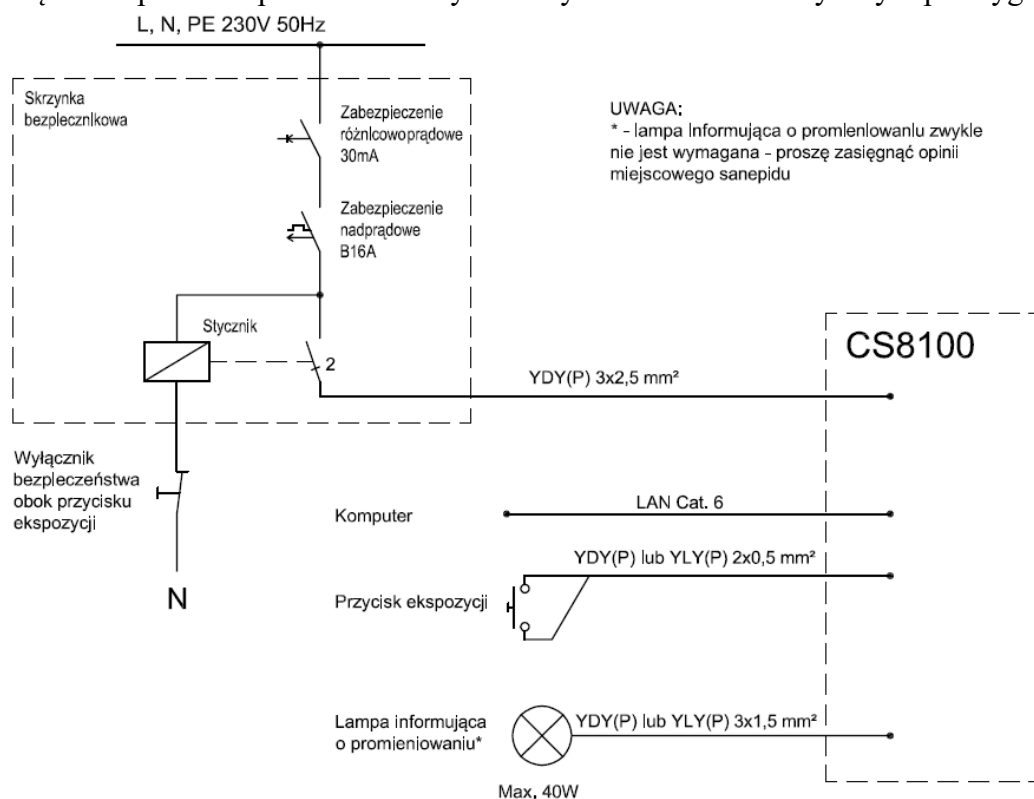

Rysunek 5 Schemat instalacji elektrycznej

Zabezpieczenie urządzenia oraz stycznik może być zlokalizowane w głównej rozdzielni, jak również w dodatkowej skrzynce bezpiecznikowej. Dopuszcza się zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego z członem nadprądowym B16A i pominięcie wyłącznika nadprądowego.

- Przewody od strony urządzenia zalecamy wypuścić ze ściany i zamontować głęboką puszkę instalacyjną oraz dostarczyć podwójne gniazdo sieci komputerowej RJ-45. Puskę zlokalizować obok planowanego miejsca instalacji kolumny na wysokości około 90cm (środek puszki). Nie należy montować puszki bezpośrednio za kolumną, gdyż uniemożliwi to instalatorowi podłączenie przewodów.
- **Przewód RJ-45 kat.6 od aparatu do komputera z obu stron zakończyć gniazdami sieciowymi kat.6.** Proszę pamiętać, że przewód musi biec bezpośrednio od urządzenia do komputera bez żadnych urządzeń aktywnych w torze kablowym (switche, routery itp.) – tak jak połączenie komputer-komputer.
- Przewód od ekspozycji (2x0,5mm²) należy wyprowadzić w miejscu, w którym ma się znajdować operator w trakcie emisji promieniowania, na wysokości jak pozostałe wyłączniki instalacyjne (lub w skrzynce operatora, jeśli jest stosowana). Możliwe jest także zastosowanie własnego przycisku, który będzie lepiej odpowiadał estetyce Państwa gabinetu. Należy wtedy pamiętać, że musi to być wyłącznik monostabilny (dzwonkowy).
- Lampa informująca o promieniowaniu zasilana i włączana jest z aparatu – **zwykle nie jest wymagana przez sanepid.**
- Wyłączniki bezpieczeństwa (awaryjnego odcięcia zasilania) należy zamontować obok przycisku ekspozycji.

III. Wymogi dla komputerów

Poniżej przedstawiono zalecane wymagania dla obsługi programu i urządzeń. Proszę pamiętać, że zakup komputera o wyższych parametrach przyczyni się do szybszej pracy programów, co znacznie poprawi komfort Państwa pracy.

Komputer odpowiedzialny za akwizycję		
Element	Zalecane wymagania dla PC przeznaczonego do zbierania i przetwarzania danych z urządzenia	Komentarz
CPU	Intel Core i5 9 generacji lub nowszy	Tylko procesory INTEL.
RAM	16 GB lub więcej	RAM ma znaczący wpływ na osiągi systemu.
Twardy dysk	10 GB dla zainstalowania i działania programu	Jeżeli komputer pełni rolę serwera (jest na nim przechowywana baza danych) musi być zastosowana co najmniej taka konfiguracja :256 Gb SSD + 1Tb HDD

Karta graficzna	Karta graficzna z chipsetem Nvidia • Minimum 4GB pamięci własnej • Dla akwizycji 3D Zalecamy jako minimum kartę graficzną Nvidia Geforce GTX 1650 lub inną o porównywalnej wydajności • Dla akwizycji 2D Zalecamy jako minimum kartę graficzną Nvidia Geforce GTX 1030 lub inną o porównywalnej wydajności	<u>UWAGA!</u> Akwizycja 3D nie będzie działać z kartami graficznymi ATI/AMD. Ilość pamięci RAM karty graficznej ma znaczący wpływ na osiągi systemu.
Monitor	• Co najmniej 1 monitor • Przekątna ekranu co najmniej 45cm (18") • Minimalna rozdzielczość 1600x900 (tylko tryb panoramiczny) • Urządzenie nie współpracuje z ekranami o proporcjach 4:3	Ze względu na kolorystykę badań zalecana jest czarna obudowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.02.2011 monitory powinny oprócz tego posiadać parametry: • Rozdzielczość: min. 0,7 Mpix • Przekątna: min. 45 cm • Luminancja: min. 200 cd/m2 • Kontrast: min. 250:1 • Częst. odchyl.: min 70Hz (CRT) Złącze DVI (LCD)
System operacyjny	• Windows 10 64 bit	<u>UWAGA!</u> Urządzenie nie pracuje pod kontrolą Windows XP, Vista oraz systemami 32 bitowymi.
Karta sieciowa	• 1x Interfejs Ethernet (1000 Mbits) – do obsługi aparatu • 1x Interfejs Ethernet – do sieci lokalnej/internetu	<u>UWAGA!</u> W przypadku instalacji dodatkowych urządzeń może być wymagana większa liczba kart sieciowych.
DVD napęd	DVD RW	Napęd DVD jest wymagany do instalacji oprogramowania i nagrywania badań na płytę.
Oprogramowanie antywirusowe	Oprogramowanie antywirusowe lub firewall może zakłócać pracę urządzenia, dlatego nie powinno być zainstalowane lub należy je odpowiednio skonfigurować.	<u>UWAGA!</u> Ewentualna konfiguracja tych programów jest w zakresie Państwa informatyka.

Komputer odpowiedzialny za przeglądanie badań		
Element	Zalecane wymagania dla PC przeznaczonego do zbierania i przetwarzania danych z urządzenia	Komentarz
CPU	Intel i3 min. 2 GHz	Tylko procesory INTEL. Zalecane procesor i5.
RAM	8 GB (16 GB dla MAR) lub więcej	RAM ma znaczący wpływ na osiągi systemu. Zalecane 16 GB RAM
Miejsce na dysku	2 GB dla zainstalowania i działania programu	
Karta graficzna	Zalecamy jako minimum kartę graficzną Nvidia Geforce GTX 1030 lub inną o porównywalnej wydajności	UWAGA! Ilość pamięci RAM karty graficznej ma znaczący wpływ na osiągi systemu. Zalecamy karty Nvidia.
Monitor	- Co najmniej 1 monitor - Przekątna ekranu co najmniej 45cm (18") - Minimalna rozdzielczość 1024 x 768	Ze względu na kolorystykę badań zalecana jest czarna obudowa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 18.02.2011 monitory powinny oprócz tego posiadać parametry: - Rozdzielczość: min. 0,7 Mpix - Przekątna: min. 45 cm - Luminancja: min. 200 cd/m2 - Kontrast: min. 250:1 - Częst. odchyl.: min 70Hz (CRT) - Złącze DVI (LCD)
System operacyjny	Windows 10 64 bit	UWAGA!
Karta sieciowa	1x Interfejs Ethernet – do sieci lokalnej/Internetu	UWAGA! W przypadku instalacji dodatkowych urządzeń może być wymagana większa liczba kart sieciowych.
DVD napęd	DVD RW	Napęd DVD jest wymagany do instalacji oprogramowania i nagrywania badań na płytę.
Oprogramowanie antywirusowe	Oprogramowanie antywirusowe lub firewall może zakłócać pracę urządzenia, dlatego nie powinno być zainstalowane lub należy je odpowiednio skonfigurować.	UWAGA! Ewentualna konfiguracja tych programów jest w zakresie Państwa informatyka.

IV. Monitory do pantomografów i tomografii wolumetrycznej

Biorąc pod uwagę aktualne przepisy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
2. Ustawa z dnia 29.11.2000r. Prawo atomowe Dz.U. 2019.1792

Stanowisko do przeglądu lub opisu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej powinno być wyposażone w tzw. monitor przeglądowy lub monitor opisowy spełniający następujące parametry techniczne:

- a) jednorodności (mierzoną w środku i na rogach), tolerancja:
 - dla monitorów opisowych 15%
 - dla monitorów przeglądowych 25%
- b) luminancji, zgodność maksymalnej luminancji między monitorami (dla stanowisk wyposażonych w więcej niż jeden monitor), tolerancja:
 - dla monitorów opisowych 15%
 - dla monitorów przeglądowych 10%
- c) krzywej skali szarości, tolerancja w stosunku do krzywej GSDF:
 - dla monitorów opisowych 10%
 - dla monitorów przeglądowych 20%
- d) kontrastu monitora, tolerancja:
 - dla monitorów opisowych 250:1
 - dla monitorów przeglądowych 100:1

V. Sieć komputerowa

Aby możliwe było przeglądanie zdjęć na wszystkich komputerach w klinice należy połączyć komputery w sieci. Ze względu na wielkość plików, w których zapisane są badania zalecana jest sieć Gigabit Ethernet (1Gb/s).

Nie zaleca się stosowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi jak również najstarsze sieci Ethernet 10Mb/s – w przypadku tego typu sieci mogą występować duże opóźnienia w otwieraniu zdjęć i wyświetlaniu listy pacjentów.

VI. Wykaz czynności wykonywanych podczas autoryzowanego przeglądu gwarancyjnego będącego potwierdzeniem gwarancyjnej opieki serwisowej.

Przeglądy techniczne Optident Carestream są wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadający certyfikację Carestream z użyciem dedykowanego sprzętu kontrolno – pomiarowego.

Zgodnie z normami producenta przegląd gwarancyjny powinien odbywać się raz na 12 miesięcy. Czas trwania przeglądu ocenia się na 2 do 3 godzin. Podczas przeglądu wymagana jest obecność personelu korzystającego z urządzenia medycznego lub / i właściciela / osoby uprawnionej do potwierdzenia faktu wykonania przeglądu przez inżyniera serwisu.

Regularne wykonywanie przeglądu technicznego z dużym prawdopodobieństwem diagnozuje i zapobiega ewentualnym kosztownym serwisom związanym ze zużyciem części składowych aparatu. Korzyści wynikające z kalibracji to dłuższa żywotność aparatu, zmniejszenie liczby nieplanowanych napraw i niższe koszty konserwacji.

Autoryzowany przegląd gwarancyjny obejmuje:

1. Kompleksowy przegląd stanu technicznego aparatu i jego składowych.
2. Kontrolę zamocowania i stabilności aparatu.
3. Kontrolę płynności pracy poszczególnych składowych aparatu.
4. Kontrolę jakości obrazowania.
5. Pełną wymaganą kalibrację z wykorzystaniem fantomów (dla pantomografii, cefalometrii i tomografii).
6. Kontrolę szczelności generatora.
7. Kontrolę elementów elektronicznych oraz instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami prawa.

VII. Wykaz zużywalnych części eksploatacyjnych Carestream:

1. Folie ochronne do radiowizjografii, skanerów płytek, pantomografii i cefalometrii.
2. Płytki obrazowe skanerów CS 7200 i CS 7600.
3. Zagryzaki do pantomografii i tomografii.
4. Podbródki do pantomografii i tomografii.

VII. Dokumentacja zdjęciowa


Poniżej zamieszczono kilka przykładowych zdjęć urządzenia.



Rysunek 6 Urządzenie zamontowane na płycie montażowej



Rysunek 7 Widok otworów montażowych

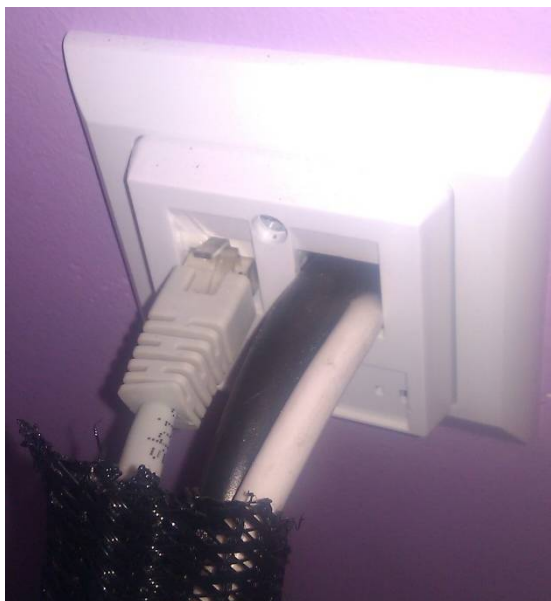

Rysunek 8a Podłączenie przewodów do gniazda RJ45, kabla zasilającego i kabla do ekspozycji



Rysunek 8b Drugi sposób podłączenia przewodów do gniazda RJ45, kabla ekspozycji i gniazda zasilającego




Rysunek 9 Przykładowe rozwiązanie panelu operatora z podglądem na pacjenta



Rysunek 10 Aparat zamontowany do podłogi



Rysunek 11 Standardowy przycisk ekspozycji

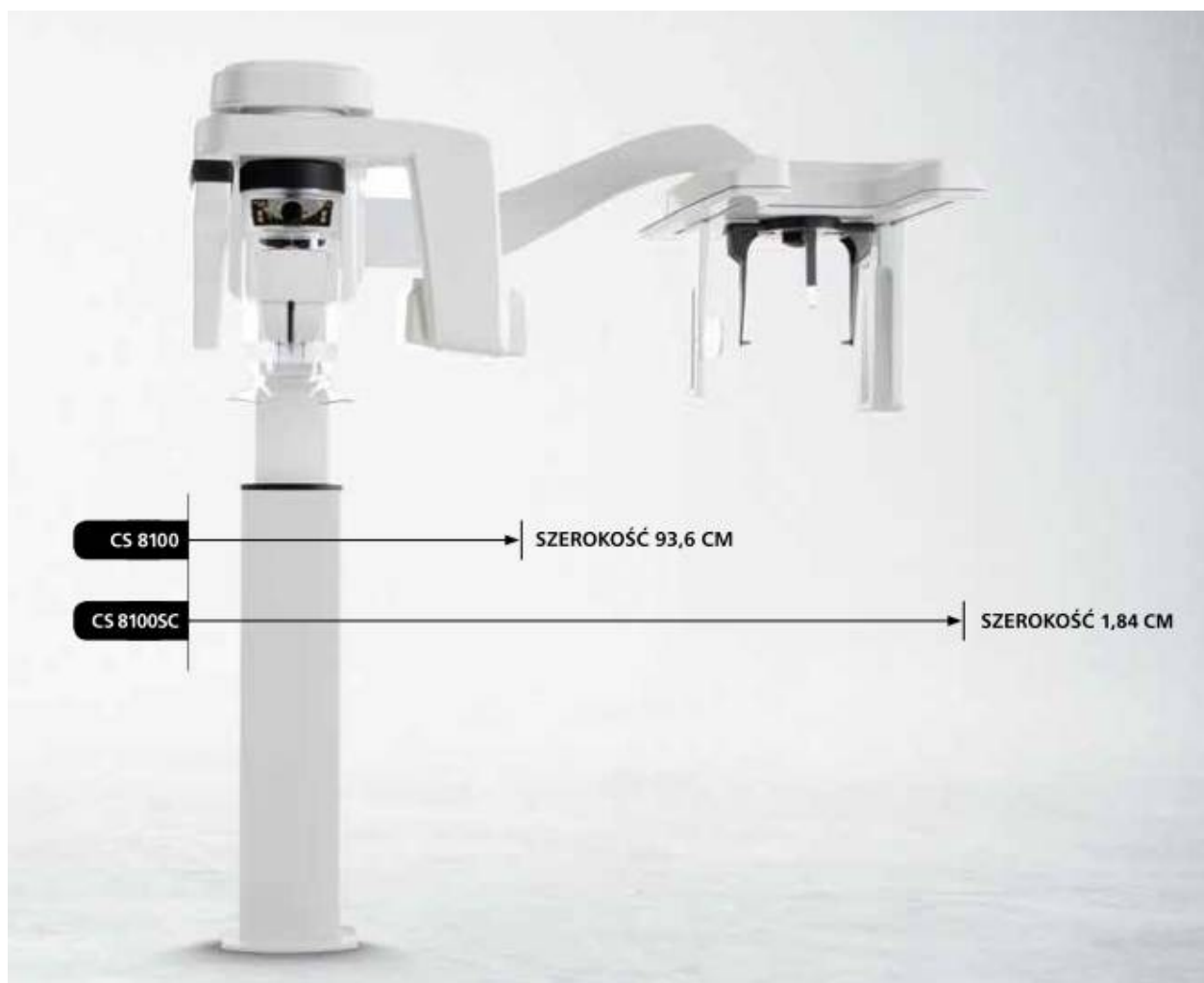

Rysunek 12 Aparat z przystawką cefalometryczną

PODPIS SPRZEDAJĄCEGO

PODPIS KUPUJĄCEGO

Optident Group Sp. z o. o.
(dawniej: Optident Spółka jawna Małgorzata Foubert, Dariusz Stój)
ul. Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
NIP 897 16 15 843

tel. +48 71 308 41 40
mail: biuro@optident.pl
www.optident.pl

Konto:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta 39 1030 1289 0000 0000 8406 8004