

Szybkość Jakość Ergonomia

Cyfrowa efektywność >

< Ergonomia kliszy

Skanery płytek Carestream Dental

Odkryj wyjątkowe połączenie cyfrowego obrazu
z elastycznością kliszy

DOSKONAŁE WSPARCIE TWOJEGO GABINETU




CS 7200

Kompaktowy i łatwy w użyciu,
przystępny cenowo
skaner **CS 7200** jest idealnym
rozwiązaniem w Twojej
codziennej pracy z pacjentem.



IDEALNA RÓWNOWAGA POMIĘDZY **RADIOWIZJOGRAFIĄ A KLISZĄ**

Carestream Dental to niekwestionowany lider rynku rtg, który od lat wyznacza nowe trendy w branży – dlatego nie ma lepiej przygotowanej firmy, która mogłaby rozwinąć system łączący cechy tych dwóch technologii.

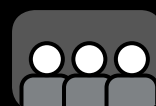

CS 7600

Niezwykle wszechstronny i w pełni zautomatyzowany system sprawia, że skaner **CS 7600** jest idealnym wyborem dla Twojej wielogabinetowej kliniki.

Nasz system płytek fosforowych (obrazowych) przynosi korzyści zarówno zwolennikom radiowizjografii jak i tradycyjnej kliszy - jednocześnie ułatwiając zamianę na obraz cyfrowy.



NIEWIARYGODNIE DOKŁADNY OBRAZ JUŻ W KILKA SEKUND

Niezwykłe połączenie realnej rozdzielczości do 17 lp/mm oraz możliwość przetwarzania obrazu na cyfrowy sprawia, że praca z naszym skanerem pozwoli Ci szybko i sprawnie dokonać właściwej diagnozy. CS 7600 gwarantuje idealnie skonstrastowane zdjęcia,

możliwość oglądania badania w predefiniowanych filtrach w oprogramowaniu, trzy tryby skanowania zapewniające, że za każdym razem otrzymasz pożądane zdjęcie, które łatwo zapiszesz i zachowasz.




Płytki obrazowe dają niezwykle wyraźny obraz i pozwalają wyodrębnić najmniejszy detal i uzyskać wysoki kontrast.

TECHNOLOGIA CYFROWA DLA ZWOLENNIKÓW KLISZY

Nasz system pozwoli Ci łatwo i szybko przejść na technologię cyfrową, wystarczy krótkie szkolenie i sam szybko przekonasz się, jakie możliwości dają płytki obrazowe. Jakie są cienkie i łatwe w zastosowaniu. Wierzmy, że dzięki nam Twoja praktyka osiągnie natychmiastowy sukces, wyeliminujesz szkodliwą chemię

i skrócisz czas przetwarzania obrazu cyfrowego oraz znacznie zredukujesz koszty, ponieważ jedna płytka może być użytkowana setki razy i jest łatwa w użyciu jak klisza. Nasz system jest najlepszym rozwiązaniem dla każdej praktyki- sam nie uwierzysz, jak wcześniej mogłeś pracować bez naszego skanera.

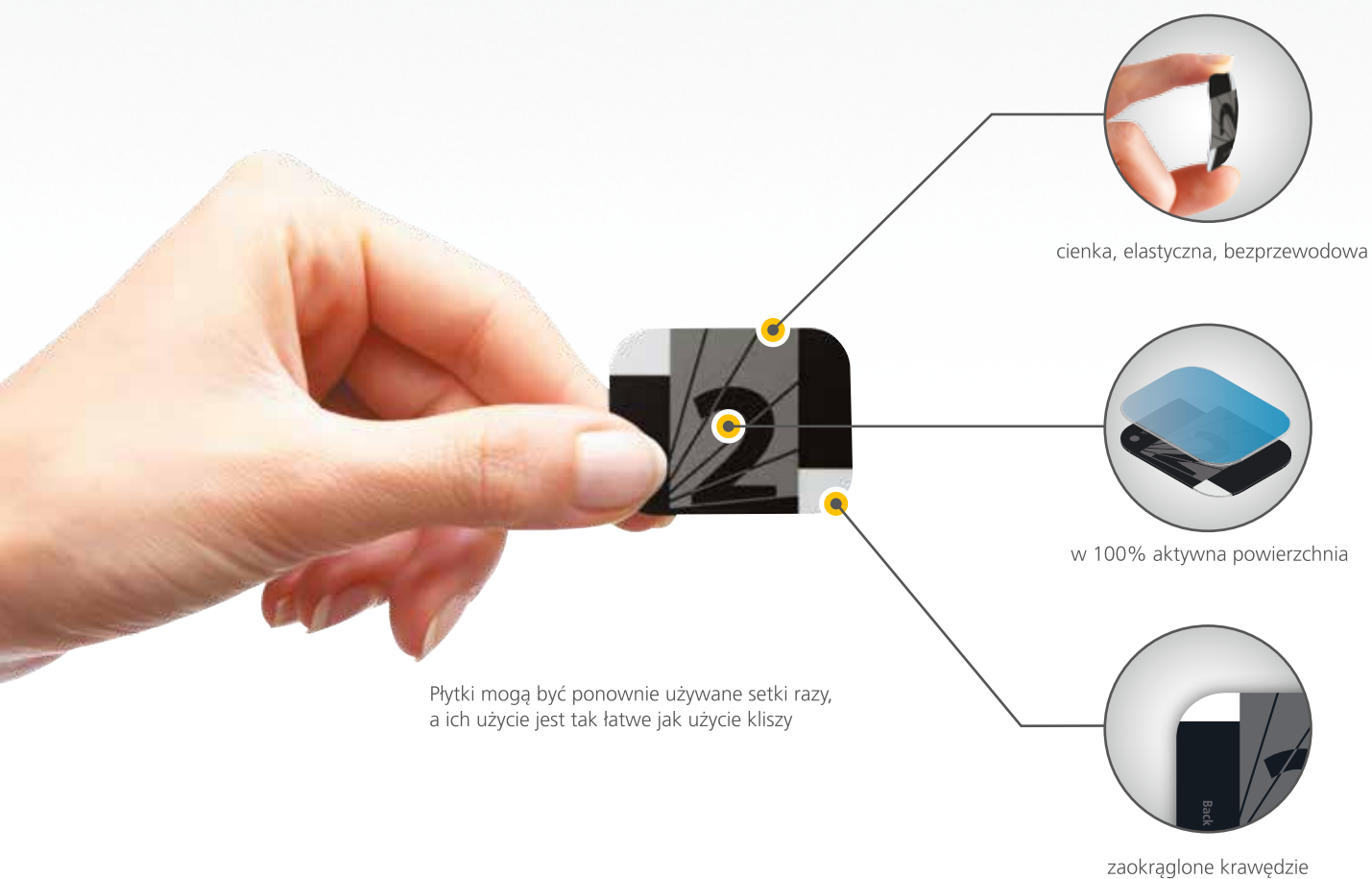

Płytki są dostępne w wielu rozmiarach, podobnie jak klisza, aby jak najlepiej dostosować je do potrzeb pacjenta.*

* rozm. 3 i 4 dostępny tylko dla CS 7600.



WSZECHSTRONNE OPROGRAMOWANIE

Bez względu na to czy używasz tylko jednego, czy kilku urządzeń do obrazowania, nasze oprogramowanie CSI pozwoli na integrację i zarządzanie obrazowaniem 2D, 3D oraz jest kompatybilne z technologią Cad/Cam.

Dzięki wszechstronnym narzędziom będziesz w szybki i prosty sposób przeglądać i analizować badania, podwyższając jakość leczenia pacjentów w Twoim gabinecie.



Zaawansowane narzędzia do przetwarzania obrazu zwiększą kontrast zdjęcia jednym kliknięciem.



Łatwy i dokładny sposób pomiaru oraz możliwość wyróżnienia interesującego obszaru.



Dostęp do wszystkich zdjęć bezpośrednio z oprogramowania do przetwarzania obrazu.


SZYBKIE PORÓWNANIE



	CS 7200	CS 7600
Użytkownik	Dla pojedynczego użytkownika	Dla kilku stanowisk pracy
Maksymalna rozdzielczość realna	17 lp/mm	17 lp/mm
Rozmiary płytek	0-1-2	0-1-2-3-4
Dostępne zdjęcia	Pediatryczne Okołowierchołkowe Skrzydłowo - zgryzowe	Pediatryczne Okołowierchołkowe Skrzydłowo - zgryzowe Cały zgryz
Czas wykonania badania	8 sek.	5 sek.
Ekran LCD z instrukcją obsługi	-	✓

NIEZNISZCZALNA PŁYTKA

Nasze płytki są dostępne nie tylko w wielu rozmiarach, ale również w bardzo przystępnych cenach. Cechuje je niezwykła trwałość, dzięki czemu możesz ich używać setki razy.

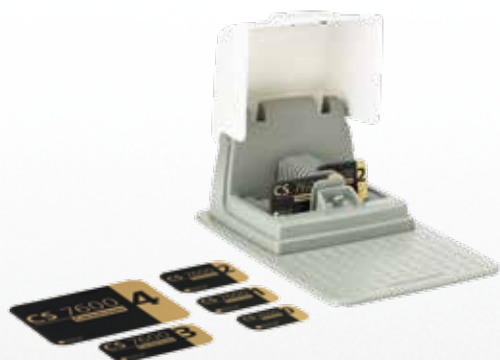

DODATKOWE AKCESORIA

Pudełko jest dostosowane do różnych rozmiarów płytek, umożliwiając ich łatwe i higieniczne przechowywanie, ale również chroni przed światłem i zarysowaniem.



CS 7200

TO IDEALNY CYFROWY **KOMPAN TWOJEJ PRACY**

Skaner CS 7200 jest nie tylko kompaktowy i łatwy w obsłudze, ale jak żadne inne dostępne urządzenie umożliwia codziennie szybką i dokładną diagnostykę wewnątrzstną. Twój pacjent nie musi wstawać z fotela, bo teraz sprawnie wykonasz potrzebne Ci zdjęcia i otrzymasz obraz w wysokiej rozdzielczości 17 lp/mm.



KLUCZOWE CECHY

- Do codziennych zdjęć wewnątrzstnych
- Rzeczywista rozdzielczość 17 lp / mm (max)
- Smukła, kompaktowa konstrukcja
- Ciche skanowanie
- Do użytku w gabinecie
- Do użytku przy unie

PROSTOTA OBSŁUGI - BEZ ZBĘDNEGO KLIKANIA

Obsługa CS 7200 jest niezwykle intuicyjna, dzięki niemu będziesz mógł się skoncentrować przede wszystkim na pracy z pacjentem. Wystarczy, że weźmiesz płytkę, zeskanujesz ją, a CS 7200 zrobi za Ciebie resztę. Odpowiedni obraz otworzy się na ekranie Twojego

komputera - bez zbędnego klikania i szukania uzyskasz zawsze prawidłowe zdjęcie, nawet jeśli płytka będzie włożona do góry nogami – urządzenie rozpozna błąd, bez kasowania, a płytkę będziesz mógł ponownie użyć.

NIEPOZORNY, PROSTY I CICHY

Smukła, stylowa i kompaktowa konstrukcja CS 7200 czyni go idealnym podręcznym skanerem. Wystarczy podłączyć go za pomocą USB do komputera i już jest gotowy do pracy. Jak żadne inne urządzenie zadba o komfort Twój i Twoich pacjentów. Nie ruszając się z miejsca, zrobisz szybko i sprawnie potrzebne badania – to wygoda i precyzja, którą docenią wszyscy.




Rozmiary dostępne dla 7600 jak na stronie 4.

NAJLEPSZA JAKOŚĆ

Dzięki skanerowi CS 7200 otrzymasz badania dostępne w trzech rozmiarach, w rozdzielczości 17 lp/mm, czyli znacznie więcej niż w innych urządzeniach dostępnych na rynku. A innowacyjny system pozwoli dodatkowo na wielokrotne użytkowanie tej samej płytki i otrzymanie za każdym razem wysokiej jakości zdjęcia.



Automatyczne wykrywanie płytki umieszczonej odwrotnie.

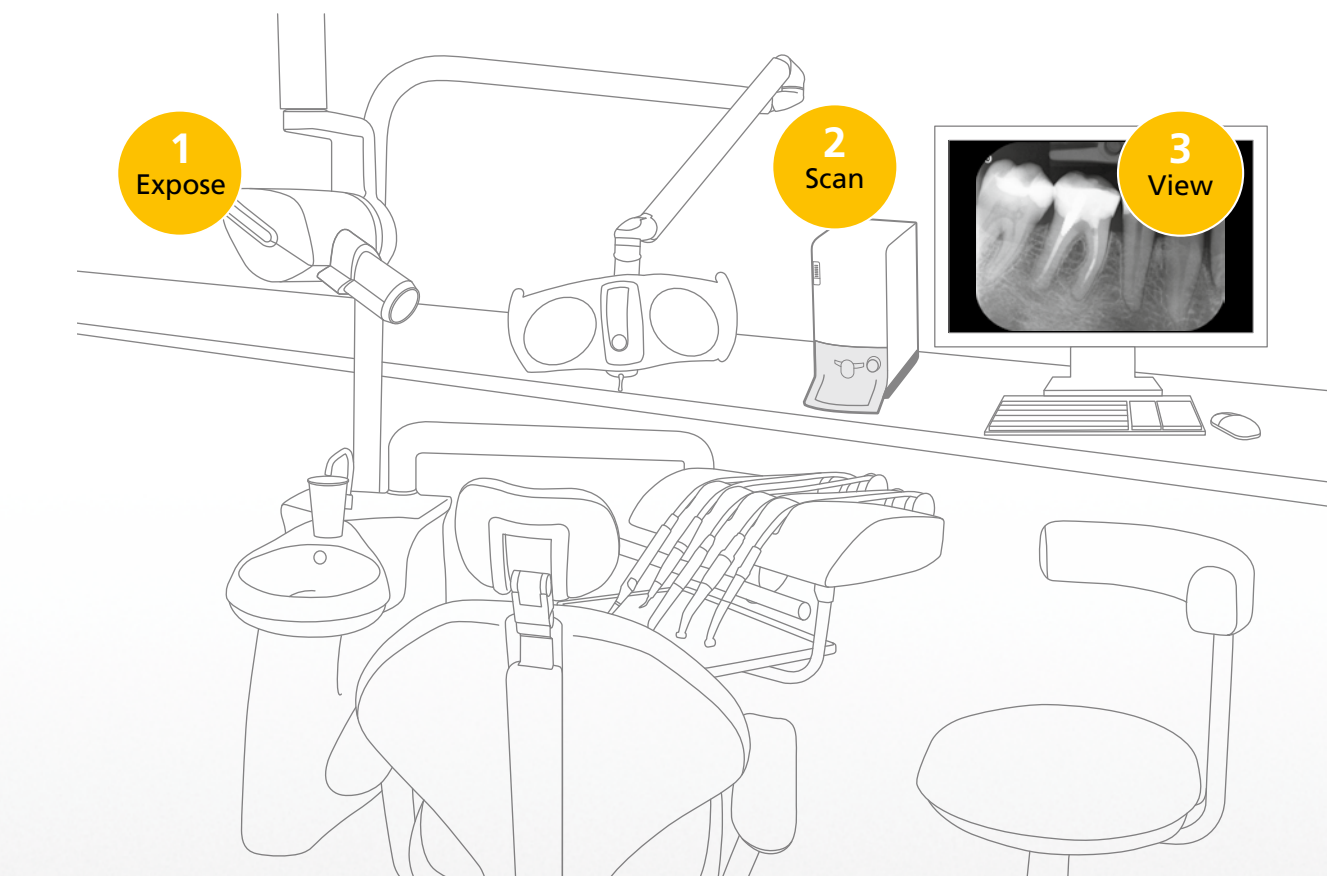

Robienie zdjęć, skanowanie i przeglądanie gotowych obrazów - wszystko w jednym miejscu.

CS 7600

INTELIGENTNY SYSTEM STWORZONY DLA **WIELU UŻYTKOWNIKÓW**

W pełni zautomatyzowany przepływ danych to idealne rozwiązanie dla wielogabinetowych praktyk. CS 7600 ustala nowe standardy systemów płytek obrazowych. Wyposażony w technologię „Scan & Go” system sprawia, że komputer automatycznie rozpoznaje pacjenta i jego zdjęcie, co zapobiega ewentualnym pomyłkom.



GLÓWNE ZALETY

Dla wszystkich rodzajów badań
Rozdzielczość 17 lp/mm,
Technologia „Scan & Go”
Kolorowy monitor LCD
Wbudowana pamięć
Do użytku wielogabinetowego

TECHNOLOGIA
SCAN & GO

ODKRYJ BARDZIEJ INTELIGENTNY I BEZPIECZNY SPOSÓB PRACY

CS 7600 zapewnia inteligentny przepływ danych, który poprawi komfort obsługi urządzenia, a technologia „Scan & Go” umożliwia rozpoznanie płytek przed badaniem. Płytki wyposażone są w elektroniczny chip, który dołączy informacje o pacjencie do zdjęcia. Podczas skanowania system automatycznie rozpoznaje

zdjęcia i wysyła je do odpowiedniego komputera oraz karty pacjenta, bez żadnej interakcji użytkownika. Płytki mogą być skanowane w dowolnym porządku bez obaw, że zostaną wymieszane czy pomyłone, a w razie potrzeby są automatycznie czyszczone i dostępne do ponownego zastosowania zaraz po skanowaniu.

ZAWSZE DOSTĘPNY

Zaprojektowany tak aby mogło korzystać z niego wiele osób - CS7600 jest zawsze gotowy do pracy; nie ma potrzeby, aby go rezerwować albo blokować innych, gdy Ty skanujesz. Aby wyeliminować niepotrzebne przeszkody stworzyliśmy system, dzięki któremu wiele osób może używać skanera w tym samym czasie dla wielu pacjentów, a technologia „Skan & Go” pozwoli na mieszane płytek pomiędzy użytkownikami i pacjentami, ale zdjęcie i tak trafi w odpowiednie miejsce – Ty nie musisz nic robić.




CS 7600 obsługuje wszystkie rozmiary płytek.

ŁATWY W UŻYCIU

CS7600 ma wbudowany kolorowy monitor z czytelną i łatwą do zrozumienia instrukcją oraz wiadomościami. Zdolność podglądu zdjęcia bezpośrednio na urządzeniu ułatwia natychmiastową weryfikację udanego badania bądź ewentualną poprawę. Skaner potrafi wykryć, czy płytka jest włożona do góry nogami bez kasowania zdjęcia. Wbudowana pamięć chroni przed utratą danych – czyli możesz kontynuować skanowanie nawet wtedy, gdy nie masz



Specjalny mikro chip z płytki wprowadza informacje z badania do odpowiedniego pliku.

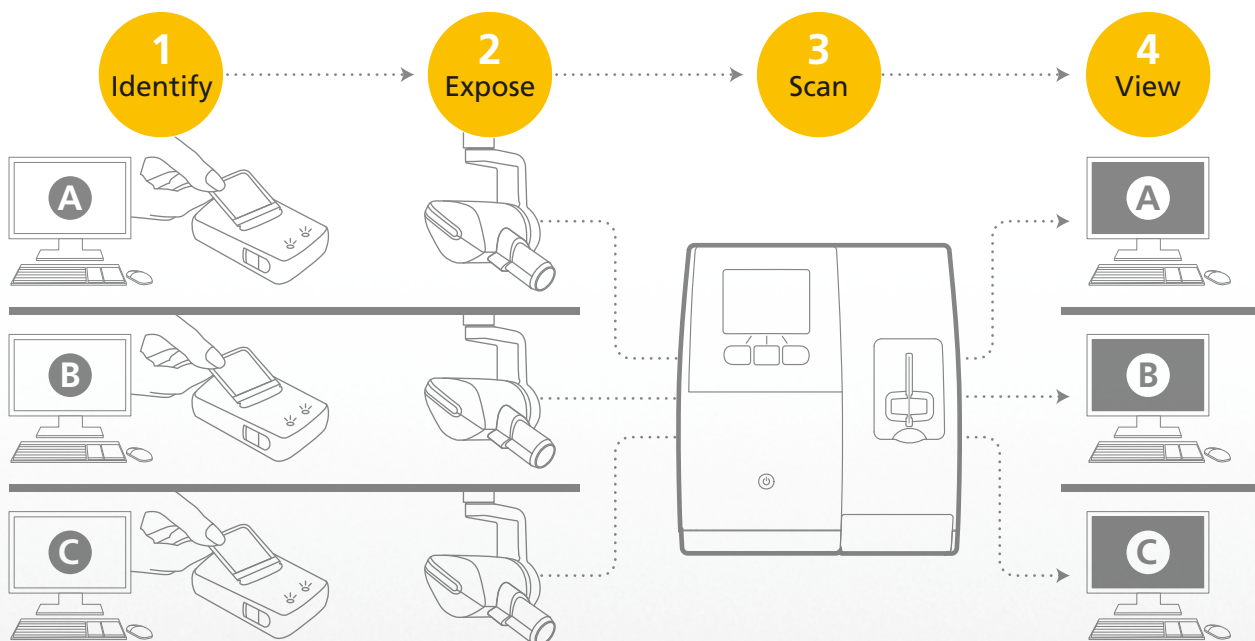


Dzięki technologii SKAN& GO, płytki są szybko zidentyfikowane i obrazy automatycznie kierowane do właściwego komputera i dokumentacji pacjenta.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	CS 7200	CS 7600
Rozdzielczość teoretyczna (max)	25 lp/mm	
Rozdzielczość realna (max)	17 lp/mm	
Rozmiary płytek (wys. x szer.)	Rozmiar 0 – 22 x 35 mm Rozmiar 1 – 24 x 40 mm Rozmiar 2 – 31 x 41 mm	Rozmiar 0 – 22 x 35 mm Rozmiar 1 – 24 x 40 mm Rozmiar 2 – 31 x 41 mm Rozmiar 3 – 27 x 54 mm Rozmiar – 57 x 76 mm
Zasilanie	100–240 V (ac), 50/60 Hz, 1.2 A	100–240 V (ac), 50/60 Hz, 1.5 A
Kasowanie płytek	Automatycznie	
Czas wykonania badania	Mniej niż 8s. na jedno zdjęcie	Mniej niż 5 s. na jedno zdjęcie
Połączenie	USB	Ethernet
Wymiary urządzenia (wys.x szer.x głęb.)	130 x 270 x 300 mm	237 x 267 x 260 mm
Waga	3.5 kg	Maksymalnie 6 kg

CS 7200

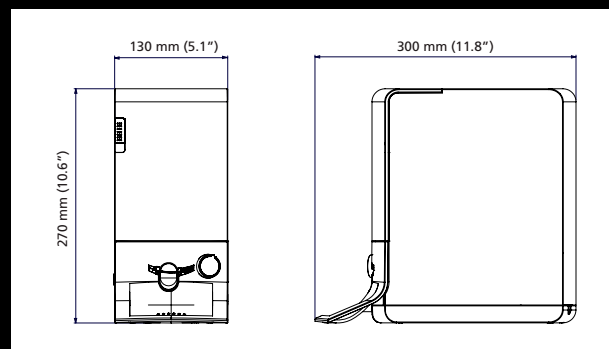

CS 7600

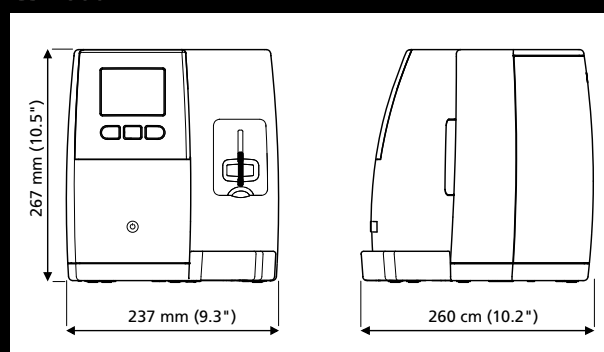

POMOC, NA KTÓRĄ ZAWSZE MOŻESZ LICZYĆ

Podobnie jak wszystkie nasze produkty, jakość systemu płytek obrazowych CS jest poparta wieloletnim doświadczeniem Carestream Dental.

Dodatkowo zawsze możesz liczyć na pomoc naszego Działu Serwisowego. Nasi Inżynierowie pomogą zdiagnozować ewentualne problemy, skonfigurować oraz zaktualizować zdalnie Twój system – minimalizując tym samym koszty naprawy oraz postoju w pracy.

BEZPIECZNA INWESTYCJA

Dla maksymalnego zabezpieczenia Twojej inwestycji proponujemy standardową 24 - miesięczną gwarancję oraz możliwość przedłużenia opieki serwisowej do 5 lat.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zamów bezpłatną prezentację w Twoim Gabinetcie: 71 781 84 10, 22 188 11 89, 501 242 101
lub odwiedź naszą stronę internetową: www.Optident.pl